




Heizkissen

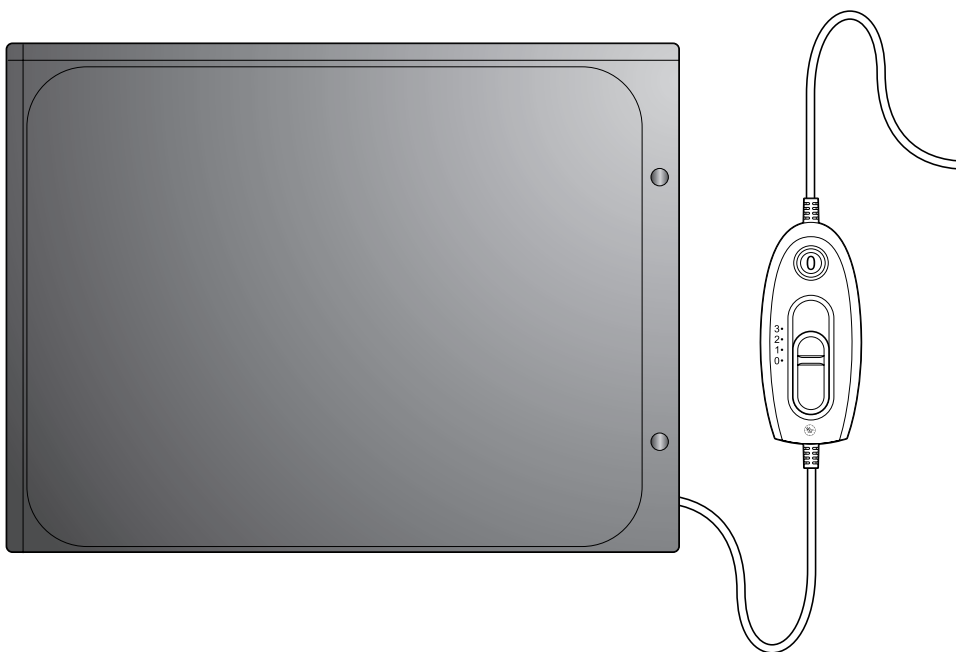

Bedienungsanleitung und Garantie

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Die Wärme Ihres neuen Heizkissens wird Ihnen gut tun, wenn Sie verspannt sind, oder wenn Sie sich einfach nur aufwärmen und entspannen möchten.

3 Temperaturstufen sorgen für angenehme Wärmeregulierung - ganz nach Bedarf. Der weiche Bezug ist waschbar.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Ausgezeichnete Produktqualität, sorgsame Auswahl und exklusive Herstellung. Nur ein Produkt, das diese Kriterien erfüllt, trägt das Qualitätssiegel von Tchibo.

Weitere Informationen unter: www.tcm-quality.com

Wichtige Hinweise - für den späteren Gebrauch aufbewahren.



Das Heizkissen ist ein schmiegsames Wärmegerät mit geringer Stromaufnahme. Es benötigt wenige Minuten zur Erwärmung.

Wenn Sie die Wärme prüfen wollen, bedenken Sie, dass eine Temperatur, die Sie mit der Hand als lauwarm empfinden, auf der Körperoberfläche schon als heiß empfunden werden kann.

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	10	Technische Daten
5	Sicherheitshinweise	10	Störung / Abhilfe
7	Auf einen Blick (Lieferumfang)	10	Entsorgen
7	Schalter-Stellungen	11	Garantie
8	Gebrauch	12	Tchibo Service Center und Kundenberatung
8	Hinweis zur Abschaltautomatik		
9	Reinigen und Lagern		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Zeichen am Gerät:

Hinweise und Bedienungsanleitung lesen

Nicht gefaltet oder zusammengeschoben verwenden oder
aufbewahren

Keine Nadeln o.Ä. hineinstechen

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Heizkissen ist für den in dieser Anleitung beschriebenen Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert. Für den Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc. ist das Rückenheizkissen nicht geeignet.
- Das Heizkissen ist kein medizinisches Gerät.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR für Personen mit Herzschrittmacher

- Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses Produktes.

GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schalter und Netzkabel dürfen keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Auch das Heizkissen darf während des Gebrauchs nicht feucht sein. Benutzen Sie es nur im trockenen Zustand - nie im feuchten Zustand benutzen!

GEFAHR durch Elektrizität

- Schließen Sie das Heizkissen nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des Gerätes entspricht.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Gefahr durch Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Benutzen Sie das Heizkissen deshalb nicht bei Gewitter und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie keine spitzen Gegenstände, z.B. Sicherheitsnadeln o.Ä., in das Rückenheizkissen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn ...
 - ... eine Störung auftritt,
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen,
 - ... nach jedem Gebrauch.Ziehen Sie am Stecker, nicht am Netzkabel.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten 4-Stufen-Schalter Type S9-P mit dem Heizkissen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Das Netzkabel darf nur durch ein Kabel desselben Typs ausgetauscht werden, das Sie im Service-Center erhalten. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Brand

- Benutzen Sie in der Nähe des Heizkissens keine Spray-Produkte. Im ungünstigsten Fall kann sich das Spray entzünden.
- Um punktuelle Überhitzungen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, benutzen Sie das Heizkissen nur auseinandergefaltet. Es darf nicht gefaltet oder zerknittert benutzt und nicht scharf geknickt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Gebrauchs nicht einschlafen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt angeschlossen sein.

- Verwenden Sie das Heizkissen nicht als Wärmeunterlage, indem Sie es z.B. unter ein Bettlaken legen. Das Heizkissen kann hierdurch beschädigt werden.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Eine lange Verwendung auf höchster Stufe kann zu Verbrennungen führen.
- Um Hautverbrennungen zu vermeiden, testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken. Benutzen Sie das Heizkissen nur mit seinem Bezug.

Verwenden Sie das Heizkissen nicht bei...

- ... Personen, die Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen können. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme und Kälte. Die Einnahme von Medikamenten oder bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm oder zu kalt wird.
- ... Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. wärmeunempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben oder bei Kreislaufbeschwerden, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.
- ... Haus- oder anderen Tieren.

- Sollte Ihnen während des Gebrauchs unwohl werden oder sonstige Beschwerden auftreten, verwenden Sie das Heizkissen nicht weiter. Wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.

VORSICHT - Sachschäden

- Das Gerät unterliegt der Alterung. Prüfen Sie deshalb vor jedem Gebrauch, ob Heizkissen, Schalter, Netzkabel oder Bezug Anzeichen


von Abnutzung oder Beschädigung zeigen. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, schicken Sie das Heizkissen vor erneutem Gebrauch an das Service Center.

- Lassen Sie das Heizkissen nach dem Gebrauch abkühlen, bevor Sie es weglegen. Bewahren Sie das Heizkissen immer an einem trockenen, kühlen Platz, geschützt vor anderen Wärmequellen, auf. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Heizkissen ab.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Heizkissen mit Bezug

Druckknopf-Verschluss

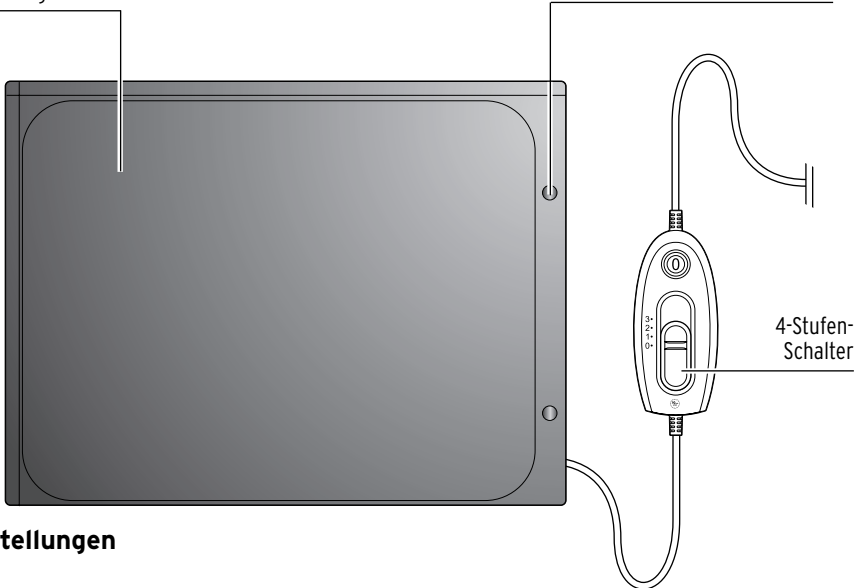

Schalter-Stellungen

- 0** = aus
- 1** = minimale Heizstufe
- 2** = mittlere Heizstufe
- 3** = maximale Heizstufe

Sobald Sie den Schalter auf **1, 2** oder **3** stellen, leuchtet die gewählte Schalterstellung.

Gebrauch



WARNUNG vor Verbrennungen

Eine lange Anwendung auf höchster Stufe kann zu Verbrennungen führen.

- Um Hautverbrennungen zu vermeiden, testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken.
- Benutzen Sie das Heizkissen nur mit seinem Bezug.

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch aufmerksam das Kapitel „Sicherheitshinweise“ weiter vorn im Heft. Dort finden Sie viele Informationen, die Sie für einen sicheren Gebrauch beachten müssen.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Legen Sie das Heizkissen auf die gewünschte Körperpartie.
4. Stellen Sie den Schalter auf Position **3**.
Nach wenigen Minuten hat das Heizkissen seine maximale Temperatur erreicht. Für einen länger andauernden Gebrauch stellen Sie den Schalter auf Position **1**.
5. Wenn Sie das Heizkissen nicht mehr benutzen wollen, stellen Sie den Schalter auf Position **0** und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei am Stecker und nicht am Netzkabel.



Das Heizkissen ist mit einer elektronischen Temperaturregelung und einem Überhitzungsschutz ausgestattet, die die Wärme regulieren und verhindern, dass sich das Kissen zu stark erwärmt.

Hinweis zur Abschaltautomatik

Das Heizkissen schaltet sich nach ca. 90 Minuten automatisch aus.

Zum erneuten Einschalten schieben Sie den Schalter für ca. 5 Sekunden auf **0** und wählen dann, je nach gewünschter Temperatur, die entsprechende Schalterposition.

Reinigen und Lagern



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Heizkissen reinigen.
- Schalter und Netzkabel dürfen keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlag besteht. Auch das Heizkissen darf während des Gebrauchs nicht feucht sein. Benutzen Sie es nur im trockenen Zustand - nie im feuchten Zustand benutzen!

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die Druckknöpfe und nehmen Sie das Heizkissen aus dem Bezug heraus.

Bezug waschen

- ▷ Der Bezug kann in der Waschmaschine bis max. 40 °C gereinigt werden. Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett. Lassen Sie den Bezug komplett trocknen, bevor Sie das Heizkissen wieder damit beziehen. Waschen Sie Bezug und Heizkissen getrennt voneinander.

Heizkissen waschen

- ▷ Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse.
- ▷ Waschen Sie das Heizkissen bei 40 °C / Schonwaschgang in der Waschmaschine. Verwenden Sie ein Feinwaschmittel. Waschen Sie Bezug und Heizkissen getrennt voneinander.
- ▷ Legen Sie das Kissen zum Trocknen nicht in die Sonne oder auf die Heizung.
- ▷ Wenn das Kissen komplett getrocknet ist, stecken Sie den Stecker wieder in die Buchse. Der Stecker passt nur in einer Position in die Buchse. Die glatte Seite muss, wie links abgebildet, oben sein.

Lagern

- ▷ Lassen Sie das Heizkissen vor dem Zusammenfalten abkühlen.
- ▷ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Heizkissen ab. Es dürfen sich keine Falten ausprägen.
- ▷ Bewahren Sie das Heizkissen immer an einem trockenen, kühlen Platz, geschützt vor anderen Wärmequellen, auf.

Technische Daten

Modell: 261 673
Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Leistung: 100 Watt
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- ▷ Prüfen Sie, ob der Stecker fest in der Buchse des Heizkissens sitzt.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schützt die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

— Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Wir übernehmen **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels.

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert.

Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an.

Bei Rückfragen geben Sie bitte die Artikelnummer an.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor:

(bitte ankreuzen)

Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.



Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
D-79206 Breisach**



(0049) - (0)1805 - 38 33 38

0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz /
Mobilfunknetze ggf. höher (Tarif: Stand Jan./2008)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

Fax: (0049) - (0)1805 - 38 33 39

E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER
BREISACH
Paketfach 90
A-4005 Linz**



(0043) - (0)800 - 711 020 012

(gebührenfrei)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenser-

vice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Birsfelderstrasse 46
CH-4132 Muttenz**



(0041) - (0)844 - 22 55 82

(Ortstarif)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail:

kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: 261 673 Deutschland/Österreich/Schweiz



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer **D 261 673** (Deutschland, Österreich, Schweiz)

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

