


Fußmassagegerät

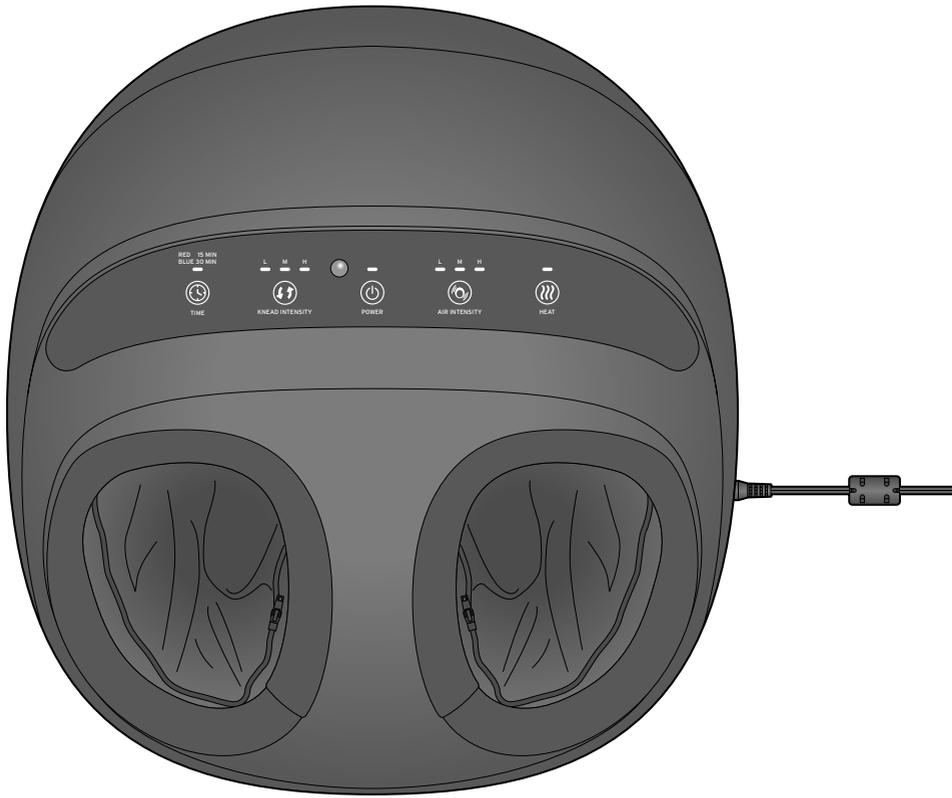

Liebe Kundin, lieber Kunde!

In Ihrem neuen Fußmassagegerät befinden sich rotierende Massageköpfe und Luftdruckkammern, die die Druck- und Knetbewegungen einer Fußreflexzonenmassage nachahmen.

Das Fußmassagegerät kann helfen ...

- ... die Durchblutung der Füße anzuregen,
- ... die Zellregeneration zu fördern,
- ... die Füße zu revitalisieren und zu beleben,
- ... Verspannungen zu lösen.

In dieser Anleitung haben wir beschrieben, wie Sie das Massagegerät sicher und sachgerecht nutzen. Denken Sie daran, dass eine falsch durchgeführte oder zu lang dauernde Massage statt zu einer Entspannung zu einer Verspannung führen kann.

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	9	Batteriewechsel
3	Sicherheitshinweise	10	Reinigen und Aufbewahren
6	Auf einen Blick (Lieferumfang)	11	Störung / Abhilfe
8	Inbetriebnahme	11	Technische Daten
8	Gebrauch	12	Entsorgen
8	Ein- und Ausschalten		
8	Timer einstellen		
9	Geschwindigkeit der Fußmassage einstellen		
9	Stärke der Luftkompression einstellen		
9	Wärmefunktion ein- und ausschalten		
9	Gebrauch der Fernbedienung		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Das Fussmassagegerät ist für die entspannende Massage der Füße konzipiert. Die Durchblutung der Füße kann gefördert und Verspannungen gelöst werden.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche, therapeutische oder medizinische Zwecke ungeeignet.



Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.

Verwenden Sie ihn z.B. nicht im Badezimmer oder in der Sauna, um Gefährdungen zu vermeiden.

Der Artikel darf nicht bei Tieren angewendet werden.

Benutzen Sie das Gerät nicht ...

... bei einer Erkrankung oder Verletzung an den Füßen (z.B. offene Wunden, Warzen, Fußpilz, Ausschlag, geschwollene oder entzündete Füße),

... bei Bein- oder Fußleiden (z.B. Venenentzündungen, Krampfadern),

... bei Bluthochdruck oder anormalem Blutdruck, Osteoporose, Diabetes oder Thrombosen,

... wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation am Fuß hinter sich haben,

... wenn Sie einen Herzschrittmacher o.Ä. tragen,

... wenn Sie unter einer Herzerkrankung oder einem bösartigen Tumor leiden,

... wenn Sie Durchblutungsstörungen oder neurologische Einschränkungen haben,

... wenn Sie sich nicht wohlfühlen,

... bei Schmerzen aus ungeklärten Gründen,

... bei Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen können.

Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme.

Die Einnahme von Medikamenten oder bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen.

Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird.

... bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. wärmeunempfindlichen Personen.

Fragen Sie im Zweifelsfall immer erst Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen!

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern.
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit ...
... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ...
... Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie ...
... beaufsichtigt oder ...
... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und ...
... die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickenungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel sowie den Netzadapter und das Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Stecken Sie den Netzadapter nur in eine vorschrittmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ übereinstimmt. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, darf es nicht selbst repariert oder ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Anschlusskabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter betrieben werden.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die beiden Innenfutter in den Fußaufnahmen Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen zeigen. Falls solche Anzeichen vorhanden sind, darf das Fußmassagegerät nicht weiter benutzt werden.

WARNUNG vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-).
Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab (z.B. mit einer Decke oder einem Handtuch).
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammaren Stoffen.

Warnung vor Verletzungsgefahren

- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden



- Benutzen Sie das Gerät nur im Sitzen. Stehen Sie nicht auf, wenn Sie die Füße ins Gerät gesteckt haben.
- Das Gerät ist für eine maximale Betriebsdauer von 30 Minuten ausgelegt. Lassen Sie es danach mindestens 30 Minuten auf Umgebungstemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Schützen Sie Batterien/Akkus vor übermäßiger Wärme.

Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen.


So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Pflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf Untergründen zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

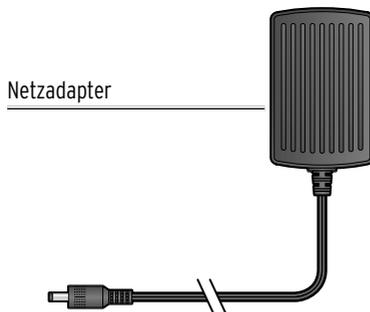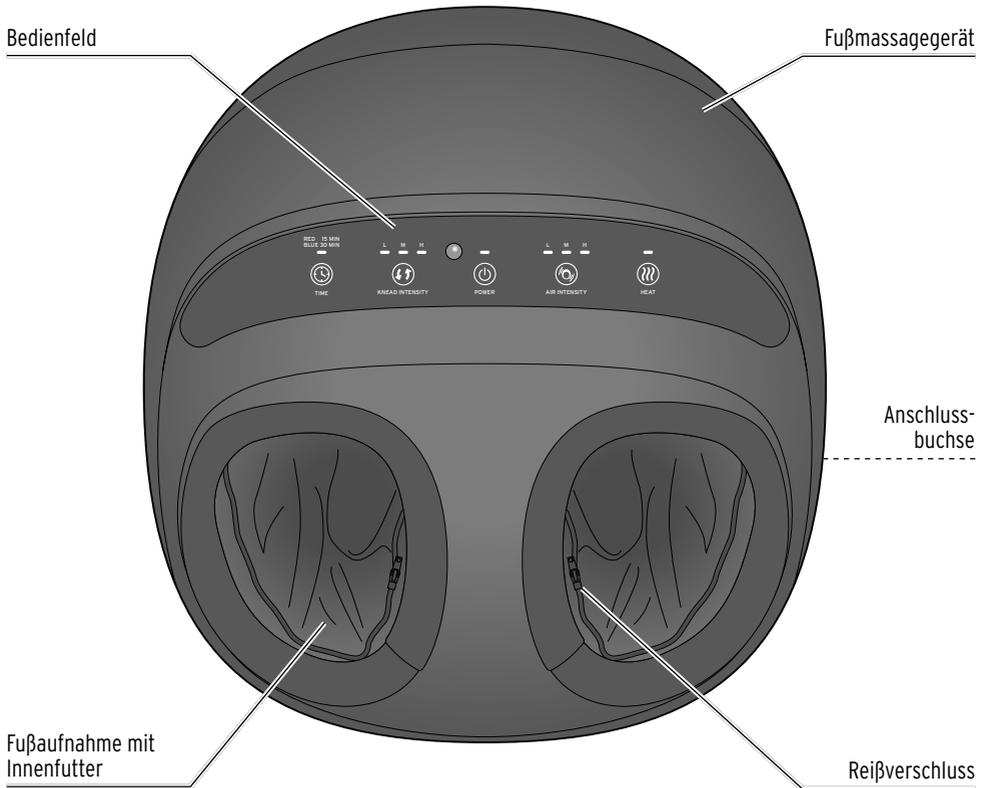

Fernbedienung

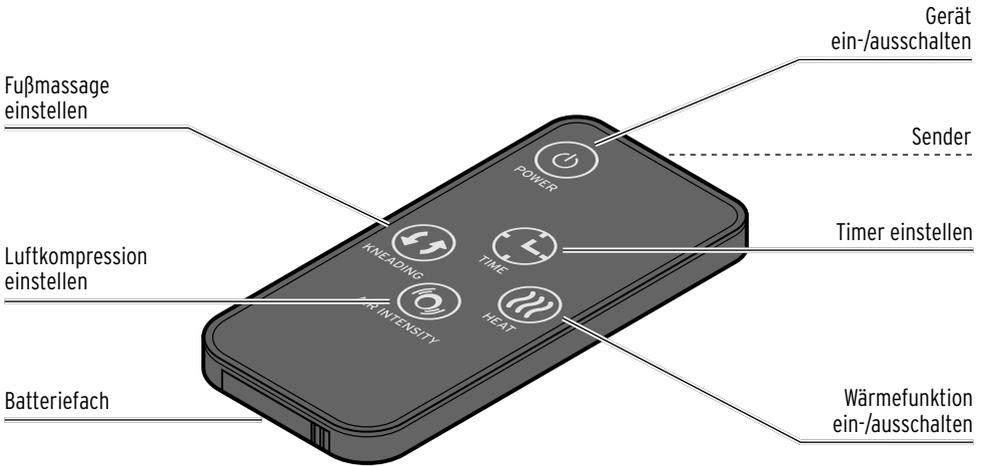

Bedienfeld

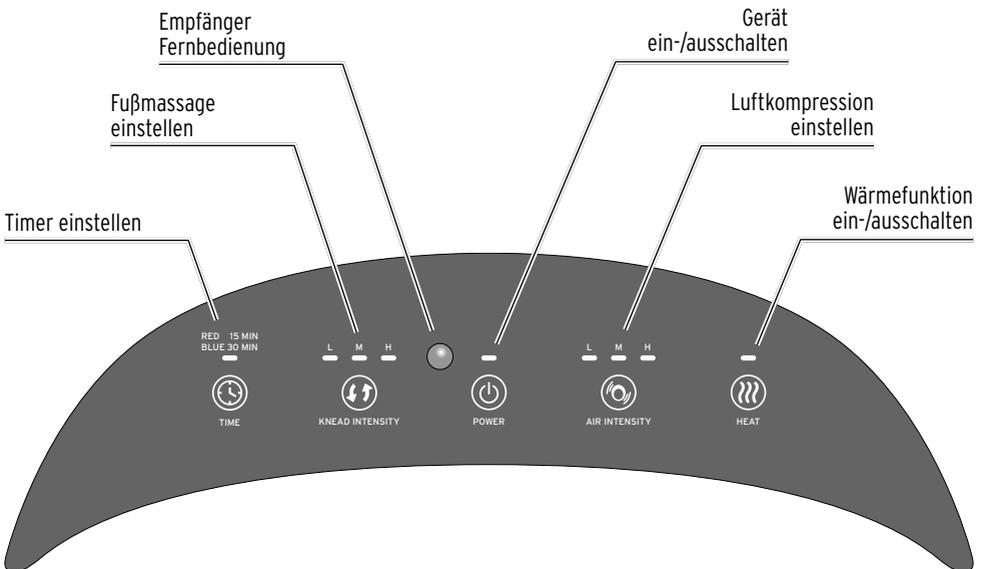


Inbetriebnahme




GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Bedienfeld ab.

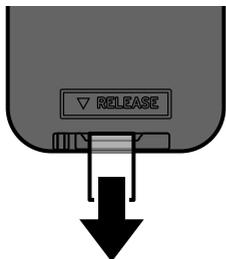

3. Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

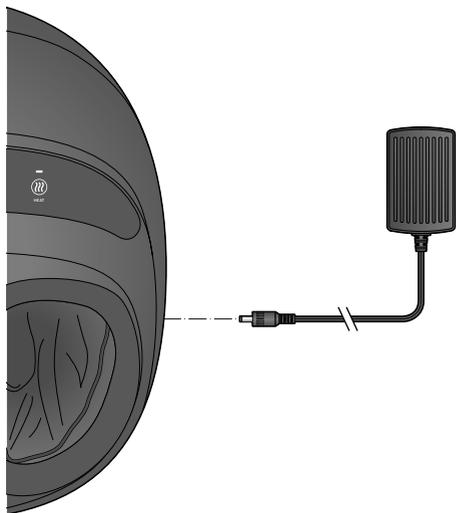

4. Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Massagegerät.
5. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.
6. Es ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchte **Power** blinkt.

Gebrauch

HINWEIS - Sachschaden

Das Gerät ist für eine maximale Betriebsdauer von 30 Minuten ausgelegt. Lassen Sie es danach mindestens 30 Minuten auf Umgebungstemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut benutzen.

1. Setzen Sie sich auf einen Stuhl in eine bequeme Position.
2. Stecken Sie die Füße vollständig in die Fußaufnahmen im Gerät.
3. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein.

Ein- und Ausschalten

- ▷ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie .

Es ertönt ein Signalton und die Kontrollleuchte **Power** leuchtet dauerhaft.

Es ist eine Massagedauer von 15 Minuten eingestellt und wird im Display angezeigt. Die Intensität der Fußmassagefunktion  und der Luftkompression  sind niedrig (**L**) eingestellt und die Wärmefunktion  ist eingeschaltet.

Die entsprechenden Kontrollleuchten leuchten auf.

- ▷ Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie wieder .

Es ertönt ein Signalton, das Gerät stoppt und alle Kontrollleuchten erlöschen.

Timer einstellen

Beim Einschalten ist eine Betriebsdauer von 15 Minuten voreingestellt und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet rot.

- ▷ Um eine Betriebsdauer von 30 Minuten einzustellen, drücken Sie .

Die Kontrollleuchte leuchtet blau.

- ▷ Um wieder eine Betriebsdauer von 15 Minuten einzustellen, drücken Sie  erneut.

Batteriewechsel

Wenn Sie das Gerät nicht vorzeitig mit der Taste  ausgeschaltet haben, schaltet es sich nach Ablauf der Betriebsdauer automatisch aus.

Geschwindigkeit der Fußmassage einstellen

Beim Einschalten ist die Geschwindigkeit der Fußmassagefunktion niedrig (**L**) eingestellt.

- ▷ Um die Geschwindigkeit der Fußmassage zu ändern, drücken Sie .

Die Geschwindigkeit wechselt auf moderat (**M**) > hoch (**H**) > aus > (**L**) etc.

Stärke der Luftkompression einstellen

Beim Einschalten ist die Stärke der Luftkompression niedrig (**L**) eingestellt.

- ▷ Um die Stärke der Luftkompression zu ändern, drücken Sie .

Die Stärke der Luftkompression wechselt auf moderat (**M**) > hoch (**H**) > aus > (**L**) etc.

Wärmefunktion ein- und ausschalten

Beim Einschalten ist die Wärme eingeschaltet und die Kontrollleuchte  leuchtet dauerhaft.

- ▷ Um die Wärmefunktion auszuschalten, drücken Sie .

Die Kontrollleuchte  erlischt.

- ▷ Um die Wärmefunktion einzuschalten, drücken Sie wieder .


Gebrauch der Fernbedienung

Alle Funktionen können Sie auch mit der Fernbedienung steuern.

- ▷ Richten Sie die Fernbedienung mit dem Sender auf den Empfänger und drücken Sie die entsprechende Taste.

-  Gerät ein- und ausschalten.
-  Timer einstellen.
-  Geschwindigkeit der Fußmassage einstellen.
-  Wärmefunktion ein- und ausschalten.
-  Stärke der Luftkompression einstellen.


Wenn das Gerät nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie gewechselt werden.

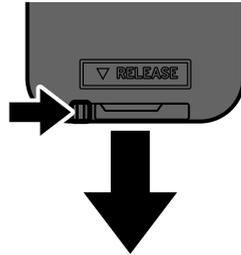


1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

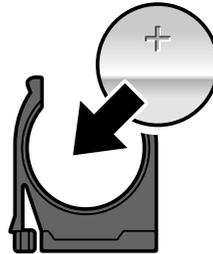

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

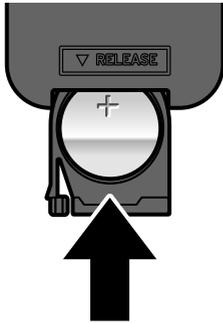

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR durch Elektrizität


- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie den Artikel sowie den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Die Innenfutter müssen vollkommen durchgetrocknet sein, bevor Sie sie wieder in das Fußmassagegerät einsetzen und das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Schalten Sie das Fußmassagegerät auf keinen Fall ein, um mit der Wärmefunktion die Innenfutter zu trocknen.

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen.
2. Entfernen Sie kleinere Flecken mit einem Tuch oder einem feuchten Schwamm.

Die Innenfutter in den Fußaufnahmen können abgenommen und gewaschen werden. Um die Innenfutter zu waschen, gehen Sie wie folgt vor:

3. Öffnen Sie die Reißverschlüsse an den Fußaufnahmen.

4. Ziehen Sie die Innenfutter aus den Fußaufnahmen heraus.
5. Waschen Sie die Innenfutter von Hand mit lauwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel.
6. Lassen Sie die Innenfutter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen. Legen Sie sie nicht zum Trocknen auf die Heizung und trocknen Sie sie nicht im Wäschetrockner.

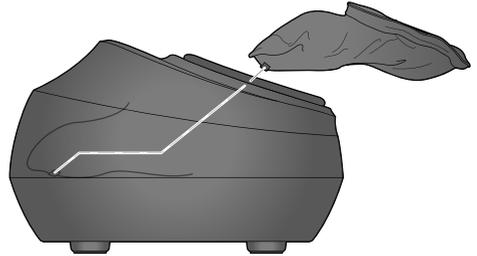

7. Setzen Sie die Innenfutter wieder in die Fußaufnahmen ein.
 8. Die Innenfutter und die Fußaufnahmen sind mit Klettstreifen versehen. Achten Sie darauf, dass die Klettstreifen wieder korrekt aufeinander liegen und schließen die Reißverschlüsse.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort auf.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Steckt der Netzadapter in der Steckdose?• Steckt der Anschlussstecker fest in der Anschlussbuchse?
Massageköpfe rotieren sehr langsam.	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die Füße zu stark auf die Massageköpfe? Die Füße dürfen nur aufgelegt werden.
Gerät schaltet sich während des Betriebs aus.	<ul style="list-style-type: none">• Das Gerät ist überhitzt. Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.• War das Gerät 30 Minuten ununterbrochen eingeschaltet? Das Gerät schaltet sich aus Sicherheitsgründen nach 30 Minuten ab. Lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen.

Technische Daten

Modell:	MD-50230B
Artikelnummer:	647 030
Batterien:	1x CR2025/3 V (Li) Nennenergie: 0,45 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Netzadapter:	
Modell:	IVP1200-2500G
Hersteller:	(Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd., 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen, 361000, P.R. China)
Schutzklasse:	II 
Eingang:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	12.0 V 2.5 A 30.0 W
	(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
	(das Symbol  zeigt die Polung des Steckers)
Effizienz	im Betrieb \emptyset : > 86,95%
	bei geringer Last (10%): > 85%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	< 0,1 W
Schutzklasse:	III 
Kurzzeitbetrieb:	30 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Modell:

MD-50230B

Hergestellt von :

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany